




ПОЛИТЭН ЛАБ

ШВ-150-Т

Тумба навесная для вытяжных шкафов

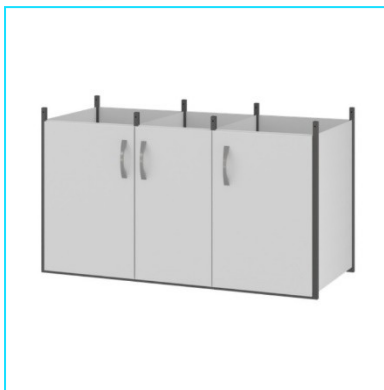

Тумба навесная для вытяжных шкафов предназначена для хранения вспомогательных приспособлений, посуды, реактивов, которые используются непосредственно в работе. Хранение агрессивных реагентов возможно при дополнительном оснащении тумбы полипропиленовой капсулой или поддонами, с обязательным подключением тумбы к вытяжной системе.

Тумба может быть выполнена из ЛДСП.

5 лет честных гарантийных обязательств.

Описание

- Каркас изготовлен из квадратного стального профиля 20×20 мм с толщиной стенки 1,2 мм.
- Корпус тумбы изготовлен из стали толщиной 1 мм.
- Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской.
- Дверки и полки выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм, с кромкой ПВХ толщиной 2 мм.
- Для продления срока эксплуатации тумбы, возможно изготовление дверок из металла, с использованием внешних петель. Металлические дверки заполнены материалом, который обладает высокими шумоподавляющими свойствами. Также возможно изготовление полок из металла.

Технические характеристики

Габаритные размеры Д×Г×В, мм	1270×590×720
Внутренние размеры левого и правого отсека тумбы Д×Г×В, мм	425×550×700
Внутренние размеры центрального отсека тумбы Д×Г×В, мм	380×550×700

ООО «Политэн»

www.politenlab.ru | mebel@politenlab.ru | (3822) 93-44-66, (913) 810-40-08